

ULTRA*Pulse* ENCORE



UNERREICHTE ERGEBNISSE IM KOMPAKTEM DESIGN

Der UltraPulse ENCORE ermöglicht nicht nur bei der Behandlung moderater bis tiefer Falten überlegene Effekte auf das Gewebe. Sie können ausserdem eine kontrollierte oberflächige Hautauffrischung erreichen.

- Laser-Peeling
- Blepharoplastik
- Skinresurfacing

Die Entwicklung unseres neuen Produkts, des UltraPulse ENCORE stand unter der Philosophie: der Beste noch besser.

- CO₂ Lite Mode mit Coolscan-Modus ideal für Patienten, die nur eine leichte Hautauffrischung benötigen sowie auch für Patienten, die sich eine lange Abheilphase nicht leisten können.
- Meistverkaufter CO₂-Laser
- Leistungstärkster CO₂-Laser mit 1000Hz und 2 x 60W
- Für chirurgische Eingriffe ist die Schneidefähigkeit des UltraPulse unübertroffen (60 Watt!)



Der Touchscreen begünstigt die intuitive Bedienung

ULTRA *Pulse* ENCORE

Technische Daten

Lasertyp:	Geschlossene CO ₂ -Röhre, HF-angeregt
Impulsabgabe:	
Energie pro Puls:	1 - 250 Millijoules
Durchschnittsleistung:	1- 60 Watt
Impulsbreite:	< 2 msec
Kühlsystem:	Unabhängiger, geschlossener Kühlkreislauf
Strahlführung:	Duralite™ Gelenkarm, 1,50 oder 1,80 m Arbeitsradius

Systemangaben

Maße:	36 x 51 x 158 cm
Gewicht:	128 kg
Elektrische Voraussetzungen:	200 - 240 VAC , 1 Phase, 50 Hz, 16 A


Der UltraPulse ENCORE ist ein Full Performance Laser, der in der Praxis, in chirurgischen Fachkliniken und Krankenhäusern zum Einsatz kommt.

Mit einer Vielzahl spezialisierter Zubehörteile eignet er sich zur Behandlung vieler verschiedener medizinischer Bedürfnisse.

CPG HANDSTÜCK



FUBSCHALTER

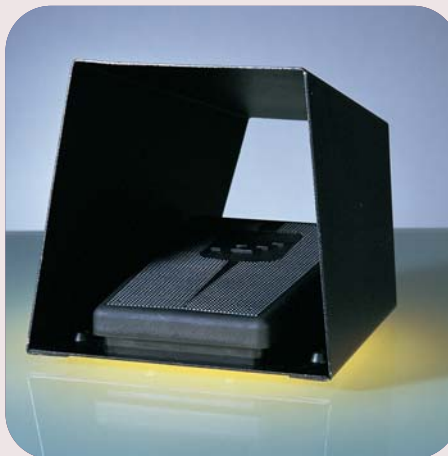

Die bekannten Einstellparameter des CPG-Scanners (Muster, Größe, Dichte) entsprechen denen des UltraPulse 5000 C. Somit können die vielfach in der Literatur angegebenen Werte auf den UltraPulse ENCORE übertragen werden.

www.lumenis.com

www.skinandhealth.com

Lumenis Inc. - USA
 Tel. + 1.408.764.3000
 Fax. + 1.408.764.3999

Lumenis Ltd. - ISRAEL
 Tel. + 972.4.959.9000
 Fax. + 972.4.959.9050

Lumenis - HOLLAND
 Tel. + 31.20.658.6265
 Fax. + 31.20.658.6770

Lumenis SARL - FRANCE
 Tel. + 33.1.41.44.99.99
 Fax. + 33.1.47.28.99.09

Lumenis GmbH - GERMANY
 Tel. + 49.6103.8335.0
 Fax. + 49.6103.8335.300

Lumenis Ltd. - HONG KONG
 Tel. + 852.2174.2800
 Fax. + 852.2722.5151

Lumenis SARL - ITALY
 Tel. + 39.06.90.75.230
 Fax. + 39.06.90.75.269

Lumenis Co. Ltd. - JAPAN
 Tel. + 81.3.5805.5331
 Fax. + 81.3.5800.5730

Lumenis AB - SWEDEN
 Tel. + 46.44.21.21.26
 Fax. + 46.44.21.21.79

Lumenis Ltd. - UK
 Tel. + 44.20.8324.4200
 Fax. + 44.20.8324.4222

